bistos

Patienten Monitor BT-770 Kurzanleitung

⚠**Vorsicht**

- Informationen zur sicheren und vollständigen Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung. Sie können die vollständige Bedienungsanleitung des BT-770 unter www.bistos.co.kr herunterladen.

1. Power EIN/AUS

(1) Die [Power]-Taste befindet sich an der Vorderseite des Gerätes.

(2) Schalten Sie das Gerät ein und prüfen Sie, ob die gelben Warnleuchten einmal blinken. Nach Abschluss der Startsequenz wird der Hauptbildschirm angezeigt. Überprüfen Sie, ob das Standard Displayformat angezeigt wird.

(3) Nach dem Einschalten startet der BT-770 mit angeschlossenem Sensor.

(4) Halten Sie die [Power]-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um dem Monitor herunterzufahren. Der Monitor wird nach 3 Sekunden ausgeschaltet.

2. Tasten


Tasten	Name	Beschreibung
	[Power]	- Einschalten: Drücken Sie die Taste länger als 2 Sekunden. - Ausschalten: Drücken Sie die Taste länger als 2 Sekunden und das System zeigt die Alarmmeldung "Das System schaltet in 3 Sekunden ab“.
	[Alarm zurücksetzen]	Zum Zurücksetzen des Alarmzustands.
	[Alarm Pause]	Zur Unterbrechung des Alarmtons. Die Alarm Pausenzeit kann auf 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 Minuten und permanent eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist 2 Minuten.
	[NIBP Start/Stop]	Starten und stoppen Sie die nicht-invasive Blutdruckmessung.
	Steuertaste	Drehen: Bewegen Sie den Cursor. Drücken: Wählen Sie das Menü oder führen Sie einen Befehl aus.
	[Einstel.]	Rufen Sie den Einstellungsmodus auf. Drücken Sie erneut, um die Einstellung zu schließen.
	[Freeze]	Freeze/unfreeze der Wellenform.

3. Smart Hotkeys

Smart-Hotkeys sind grafische Hotkeys, die am unteren Rand des Hauptbildschirms des Monitors angezeigt werden und dem Benutzer die bequeme Verwendung bestimmter Funktionen ermöglichen.

Key	Name	Beschreibung
	[Pause]	Alarm Pause
	[Pat. Eins]	Patienten-Information Einstellung
	[NIBP]	Start und Stopp der NIBP-Messung
	[Ereignis]	Manuelles Ereignis markieren
	[Displays]	Änderung des Display Formats
	[Freeze]	Freeze der Wellenform
	[Trend]	Trend-Display
	[Drucken]	Ausdruck erstellen
	[Einstel.]	Einstellungs-Menü
	[Lautst.]	Lautstärke Einstellung
	[Entsper.]	Touchscreen Sperren / Entsperren

4. Display verstehen

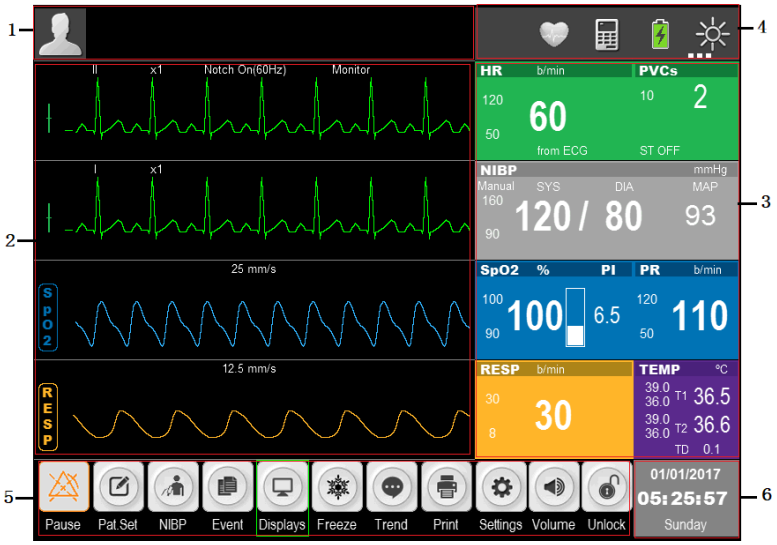

1	Patienten-Information	4	Information Tip
2	Wellenform	5	Smart-Hotkeys
3	Parameter	6	Datum und Zeit

5. Einstellungen

5-1. Sprache

(1) Wählen Sie den Smart Hotkey [Einstel.] oder drücken Sie die Taste [Einstel.] auf dem Monitorfeld, um das Menü „Einstellung“ aufzurufen.

(2) Wählen Sie “Benutzer Wartung” → Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie → „Benutzer Wartungs“ Menü.

(3) Wählen Sie "Sprache" und wählen Sie die Option wie folgt:

- “Deutsch“, “English”, “Türkçe”, “Español” oder “Français”

5-2. Datum und Zeit

(1) Wählen Sie die Einstellung und das Benutzer-Wartungsmenü in der folgenden Reihenfolge aus:

(2) Wählen Sie “Zeit-Einstellung >>” → um in das passende Menü zu gelangen.

(3) Oder Sie können die Zeit-Einstellung direkt aufrufen, indem Sie den Zeit Displaybereich auf dem Display berühren.

(4) Stellen Sie "Datum (JJJJ-MM-TT)", "Zeit (24H)" und "Datumsformat" ein.

5-3. Lautstärke-Einstellung

(1) Wählen Sie den Smart-Hotkey [Lautst] → “Lautst Einstellung” Menü und stellen Sie die Alarm-Lautstärke ein.

(2) Wählen Sie den Smart-Hotkey [Lautst] → “Lautst Einstellung” Menü und stellen Sie die QRS-Lautstärke ein.

(3) Wählen Sie den Smart-Hotkey [Lautst] → “Lautst Einstellung” Menü und stellen Sie die Puls-Lautstärke ein.

(4) Wählen Sie den Smart-Hotkey [Lautst] → “Lautst Einstellung” Menü und stellen Sie die Touch-Lautstärke ein.

(5) Wählen Sie den Smart-Hotkey [Lautst] → “Lautst Einstellung” Menü und stellen Sie die Tastatur-Lautstärke ein.

5-4. Parameter Einheit

(1) Wählen Sie die Einstellung und das Benutzer-Wartungsmenü in der folgenden Reihenfolge aus.

(2) Wählen Sie “ Einheiten Einstellen >>” → betreten Sie “ Einheiten Einstellen >>” Menü.

(3) Sie können die Einheit für Größe, Gewicht, ST, Druck und TEMP ändern.


6. Verwaltung von Patienten-Informationen


(2) Wählen Sie [Einstel.] Smart-Hotkey oder drücken Sie [Einstel.] Taste auf dem Monitorfeld → "Einstel." → "Patient >>" → "Patient" Menü. Oder wählen Sie [Pat. Eins] Smart hotkey und betreten Sie in das "Patient" Menü

(3) Geben Sie den entsprechenden Einstellungswert gemäß dem Menü ein.

7. Display Formate


Es gibt vier Display-Formate, die Sie auswählen können. Wählen Sie den Smart-Hotkey [Displays] → Display auswählen. Wählen Sie aus dem Display-Formaten aus "Standard", "großes EKG", "große Schrift" und "EKG 7-Ableitungen-Vollbild" das gewünschte Format aus.

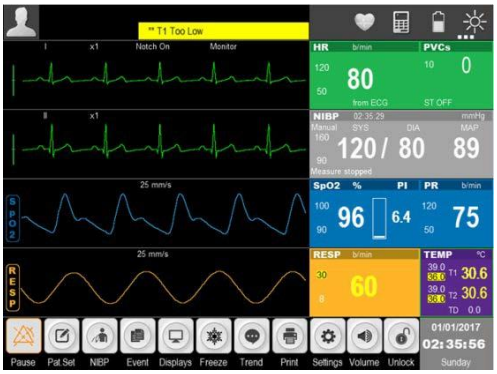

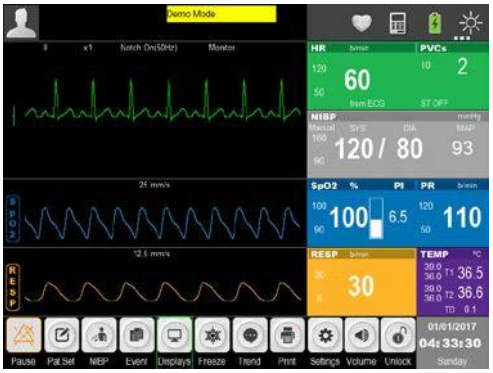



Großes Schrift-Display

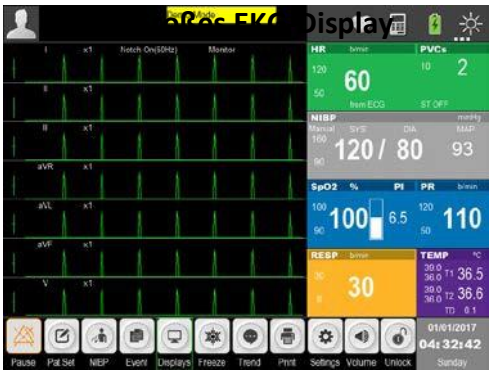

EKG 7-Ableitungen Vollbild-Display

8. Alarm Einstellung

Die Alarm-Verzögerungszeit, das Alarm-Erinnerungssignal und das Alarm-Erinnerungsintervall können eingestellt werden. Ausführliche Informationen zu den Alarmgrenzwerten der einzelnen physiologischen Parameter finden Sie in der Bedienungsanleitung.

9. Reinigung

(1) Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden. Erhöhen Sie in stark verschmutzten Umgebungen die Frequenz der Reinigung.

(2) Schalten Sie den Monitor aus und ziehen Sie das Netzkabel.

(3) Verwenden Sie einen weichen Wattebausch für den Bildschirm und ein weiches, fusselfreies Tuch, um die Oberfläche des Geräts abzuwischen.

(4) Lassen Sie das Gerät in einer gut belüfteten, kühle Umgebung von Luft trocknen.

bistos

7th Fl., A Bldg., Woolim Lions Valley 5-cha, 302,
Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
[Global] TEL : 82-31-750-0340 www.bistos.co.kr bistos@bistos.co.kr