

BCM700 Zentrales Überwachungssystem Kurzanleitung

Die Auflösung muss 1920 x 1080 oder höher sein

1. BCM700 Programminstallation


(1) Wenn die Installation durch Ausführen der Installationsdatei abgeschlossen ist, wird eine Verknüpfung für den BCM700 auf dem Desktop erstellt

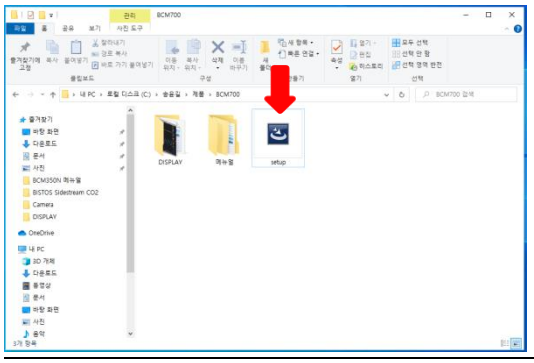

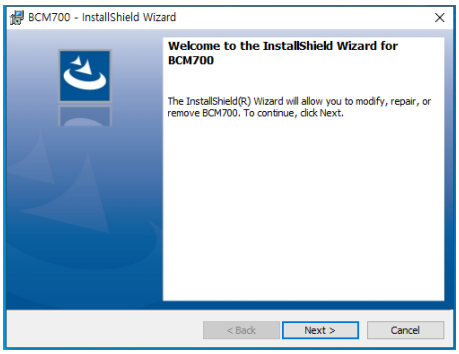



(2) Wenn Sie mit einem Doppelklick auf das Symbol das BCM700-Programm starten, wird folgender Bildschirm angezeigt.

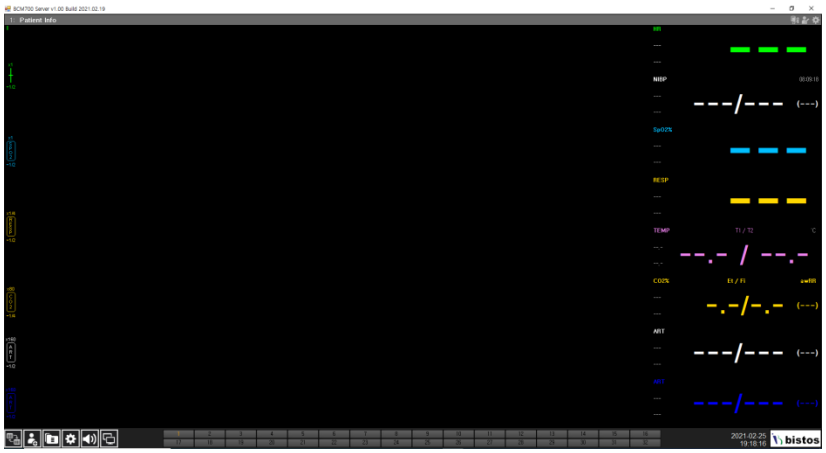


2. CMS-Einstellung


(1) Bitte klicken Sie auf das Symbol mit dem Pfeil unten links auf dem Bildschirm.




(2) Bitte klicken Sie im Setup-Menü auf "Kommunikation".


Bitte wählen Sie die Bettnummer, geben Sie die IP des Gerätes ein und klicken Sie auf "Speichern".

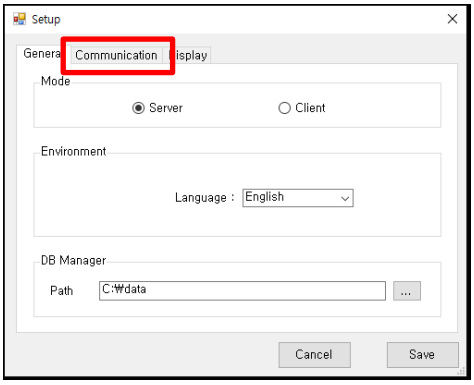

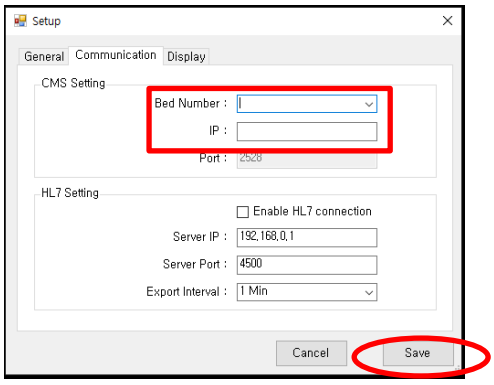

(3) Klicken Sie bitte auf "OK" und führen Sie das Programm erneut aus.

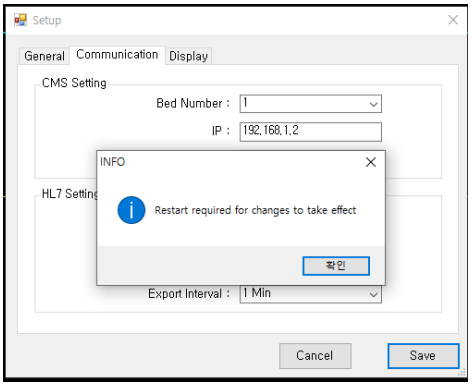

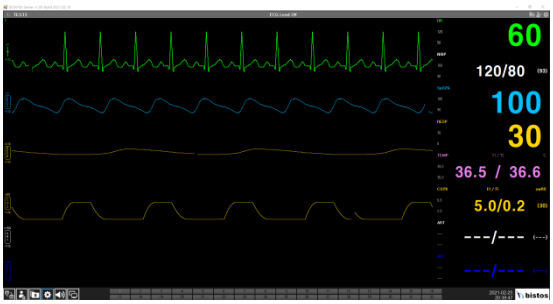


3. Patientenregistrierung


(1) Bitte klicken Sie auf das Symbol mit dem Pfeil unten links auf dem Bildschirm.



Bitte klicken Sie auf "Neu", geben Sie Patienteninformationen ein und klicken Sie auf "Erstellen".

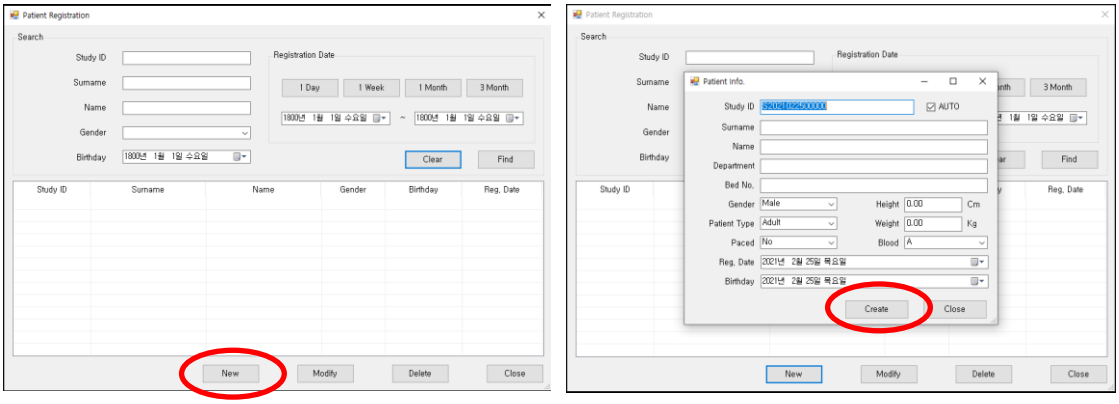

(2) Wenn Sie auf "Suchen" klicken, können Sie die Liste der angemeldeten Patienten überprüfen.

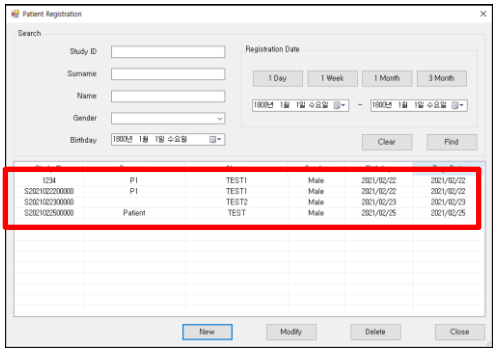


4. Patientenzuweisung


(1) Bitte klicken Sie auf das Symbol mit dem Pfeil oben rechts auf dem Bildschirm.




(2) Bitte klicken Sie auf "Suchen", wählen Sie den zu überwachenden Patienten aus und klicken Sie auf "Aufnehmen".

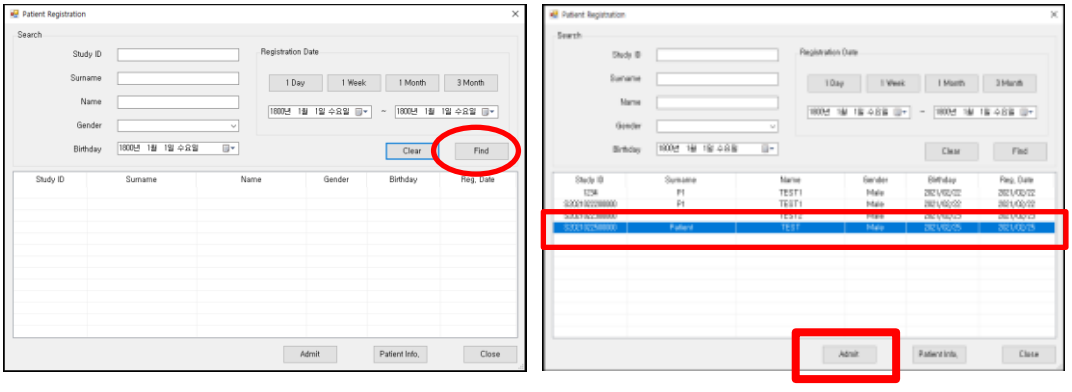

Wenn Sie auf "Ja" klicken, wird der ausgewählte Patientenname oben links angezeigt.

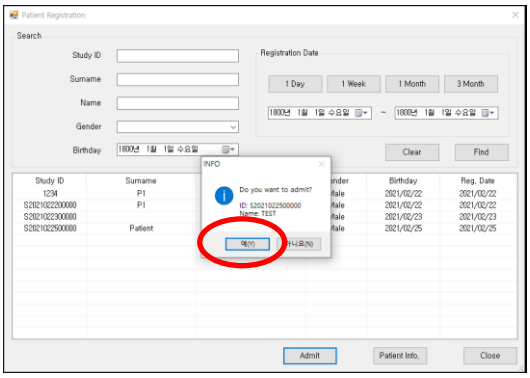

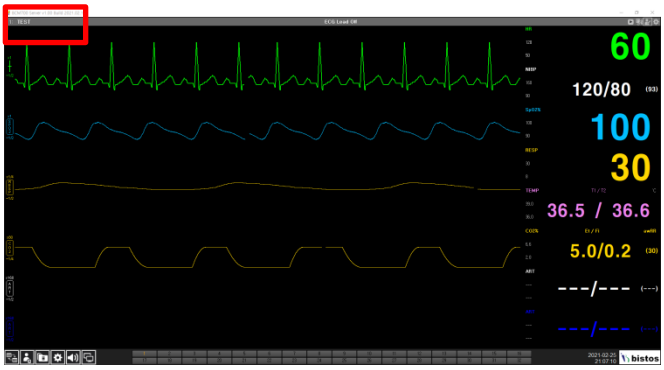

(3) Wenn Sie den Patienten wechseln möchten, können Sie dies über den Prozess der Patientenzuweisung tun.

5. Menü Betteneinstellung

Sie ändern die Einstellung für jedes Bett.

Bitte klicken Sie auf das Symbol mit dem Pfeil oben rechts auf dem Bildschirm.



(1) Sie können Wellenform, Verstärkung, Geschwindigkeit und Parameter in der Anzeigeeinstellung ändern.




Wellenform: AN/AUS

Geschwindigkeit : 1/8, 1/4, 1/2, 1

Parameter : AN/AUS

(2) Sie können die manuelle und automatische Messung der NIBP im Programm verwenden.

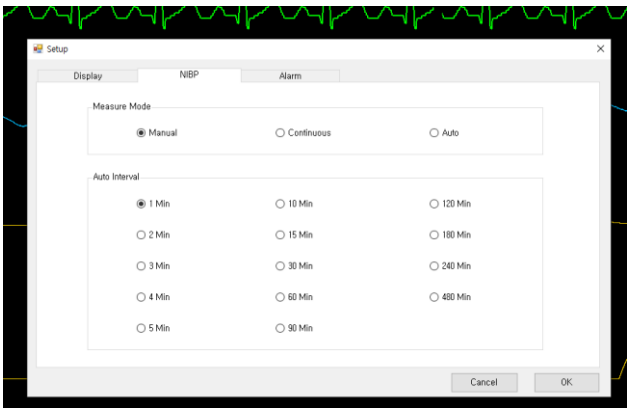

Sie können die Intervallzeiteinstellung verwenden, wenn Sie die automatische Messung nutzen. " 1Min, 2Min, ~, 480Min"

(3) Wenn Sie auf das Symbol mit dem Pfeil klicken, können Sie die manuelle und automatische NIBP-Messung verwenden

Bitte beachten Sie (2) in Abschnitt 5 für die manuelle/automatische Einstellung.





6. Einstellungen der Bildschirmansicht

(1) Einzel-/Mehrfachansicht


Sie können die Einzel- und die Mehrfachansicht anzeigen, indem Sie auf das durch einen Pfeil gekennzeichnete Symbol klicken.



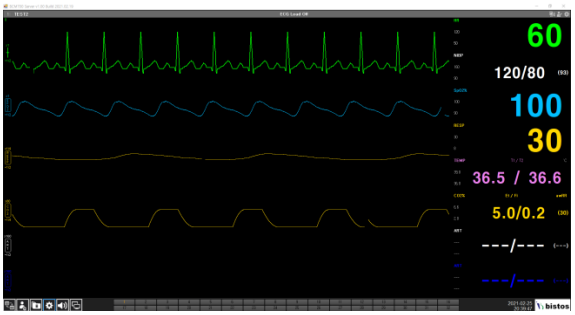

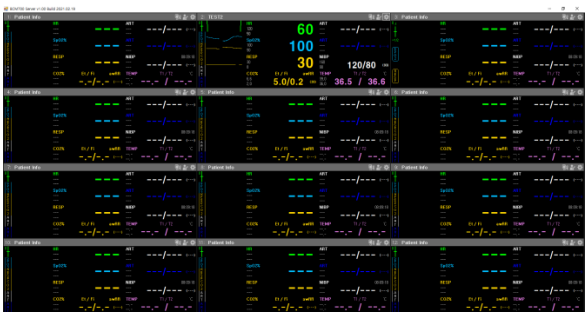


Sie können Betten hinzufügen oder löschen, indem Sie auf die Bettnummer am unteren Rand des Bildschirms klicken. Die hinzugefügte Bettnummer wird hervorgehoben.

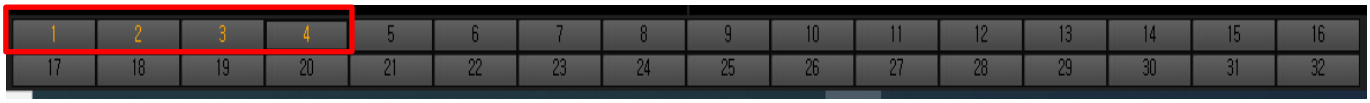

(2) DUAL-Bildschirmansicht

Wenn Sie auf das mit dem Pfeil gekennzeichnete Symbol klicken, wird der Dual-Bildschirm angezeigt. Sie können den Dual-Bildschirm schließen, indem Sie auf "Beenden" klicken.



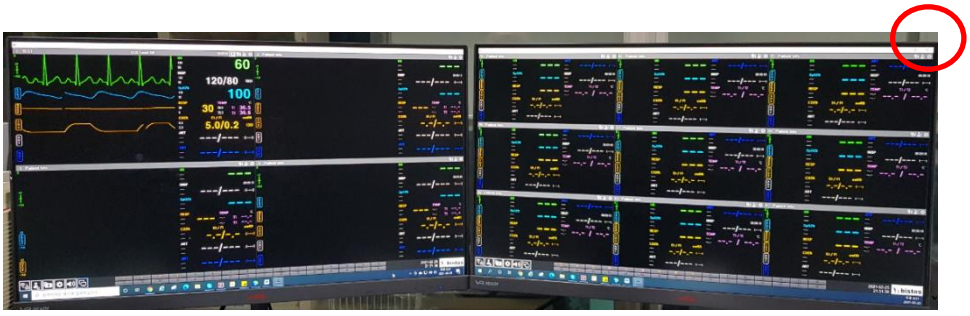

7 Aktenverwaltung

Klicken Sie auf das mit dem Pfeil gekennzeichnete Symbol, klicken Sie dann auf "Suchen" und es erscheint eine Patientenliste.

Sie können das Ergebnis des Patiententests überprüfen, indem Sie auf "Überprüfung" klicken

Sie können Daten ausdrucken, indem Sie auf "Drucken" klicken.



Kontaktinformationen

Hersteller	Bistos Co.,LTD 116~122 3th Factory, Jungang inthespia 3cha, Jungwon-Gu, Sungnam-si, Gyeonggi-do
Kontakt	031-750-0340
Fax	031-750-0344
Homepage	www.bistos.co.kr
E-Mail	bistos@bistos.co.kr