Technischer Kundendienst Hotline

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner, oder kontaktieren Sie den technischen Kundendienst über:

USA
+ 1 855 731 2288 ts.scr@abbott.com

Afrika, Russland, GUS-Staaten
+ 44 161 483 9032 EMEproductsupport@abbott.com

Asien-Pazifik-Raum
+ 61 7 3363 7711 APproductsupport@abbott.com

Kanada
+ 1 800 818 8335 CANproductsupport@abbott.com

Europa und Naher Osten
+ 44 161 483 9032 EMEproductsupport@abbott.com

Lateinamerika
+57 (1) 4824033 LAproductsupport@abbott.com

Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
10 Southgate Road
Scarborough, Maine 04074 USA
www.globalpointofcare.abbott

IVD

© 2020 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.

Software © 2020 Axxin, used under license.
All trademarks referenced are trademarks of their respective owners.

IN43500ide Rev.6 2020/08

Ein externer positiver und ein steriler Tupfer für die Negativkontrolle müssen einmal bei jeder neuen Lieferung und einmal für jeden ungeschulten Anwender getestet werden.

Für QK-Tests wählen Sie auf der Startseite „QK-Test starten“ aus und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Weitere Informationen hierzu sind unter „Durchführung eines QK-Tests“ im Benutzerhandbuch des Geräts ID NOW Instrument zu finden.

1 Drücken Sie auf „QK-Test starten“.

2 Wählen Sie im Menü „RSV“ aus.

3 Wählen Sie den durchzuführenden QK-Test aus.

4 Test bestätigen:
Bestätigen Sie mit „OK“ den Testtyp, der zu der zu testenden QK-Probe passt, und folgen Sie den Bildschirmaufforderungen zur Durchführung des Testvorgangs.

Hinweis: *Der QK-Test wird auf dieselbe Weise wie ein direkter Nasopharyngeal-Abstrich-Patiententest durchgeführt. Die schrittweisen Anweisungen befinden sich auf der anderen Seite.*

Abbott

ID NOW™ RSV KURZANLEITUNG

Erforderliche Materialien zum Starten eines Tests:

Testbasis | Probenemp-fänger | Transferkas-sette | Nasopharyngeal-Abstrich

Gerät:

KOMPLEXITÄT NACH CLIA: BEFREIT

Die vollständigen Anweisungen sind in der ID NOW RSV Gebrauchsinformation und im Benutzerhandbuch zu finden.

ID NOW™

RSV
KURZANLEITUNG


Vor der Testdurchführung lesen Sie das vollständige Testverfahren und zusätzliche Informationen in der ID NOW RSV Gebrauchsinformation und im Benutzerhandbuch durch.

Befolgen Sie die schrittweisen Anweisungen auf dem Gerätebildschirm.

1




2

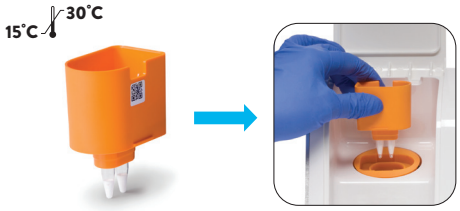


3



4

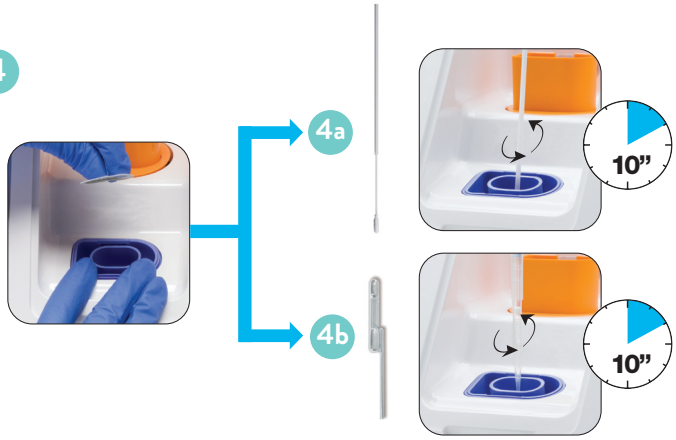


5

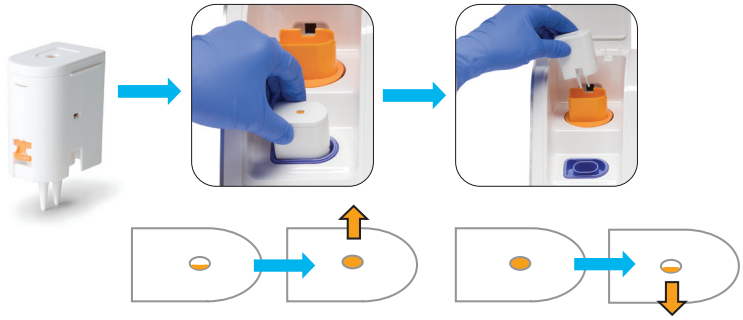

6



7

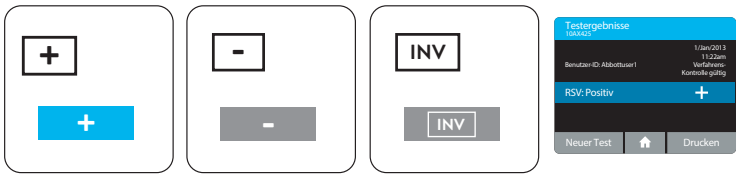

Das Verfahren für erneutes Testen bei ungültigen Testergebnissen ist in den Anweisungen der Gebrauchsinformation beschrieben.

8



Die Anweisungen zum sicheren Umgang und zur Entsorgung der Proben und Testkomponenten befinden sich in der Gebrauchsinformation.

Abbott
ID NOW RSV

QRI, DE

Size:
8.5 in. x 11 in.

Printed Colors



CMYK

Incoming Inspection Colors
(For Reference Only)
Colors below are not used for printing



PMS 2995 U
Primary Blue

PMS 303 U
Dark Blue

PMS 324 U
Mint

PN: IN435001de
Rev: 6

Date of Last Revision:
6.1 2020/08/31