Bedienungsanleitung

„Vascular Victor“ Zugangs-Trainingsmodell

Art. Nr.: 7650




Experts in medical education since 1950

ERLER ZIMMER

Erler-Zimmer GmbH & Co. KG · Hauptstr. 27 · D-77886 Lauf
Tel.: (+49) 07841/67191-0 · info@erler-zimmer.de · www.erler-zimmer.de


Vielen Dank, dass Sie sich für Vascular Victor entschieden haben. Dieses Modell ermöglicht Ihnen das Training von pflegerischen Maßnahmen im Bereich der Gefäßzugänge. Es verfügt über verschiedene Zugänge, Katheter und Ports, welche alle funktional sind und mit normaler Ausrüstung benutzt werden können.

1. Übersicht

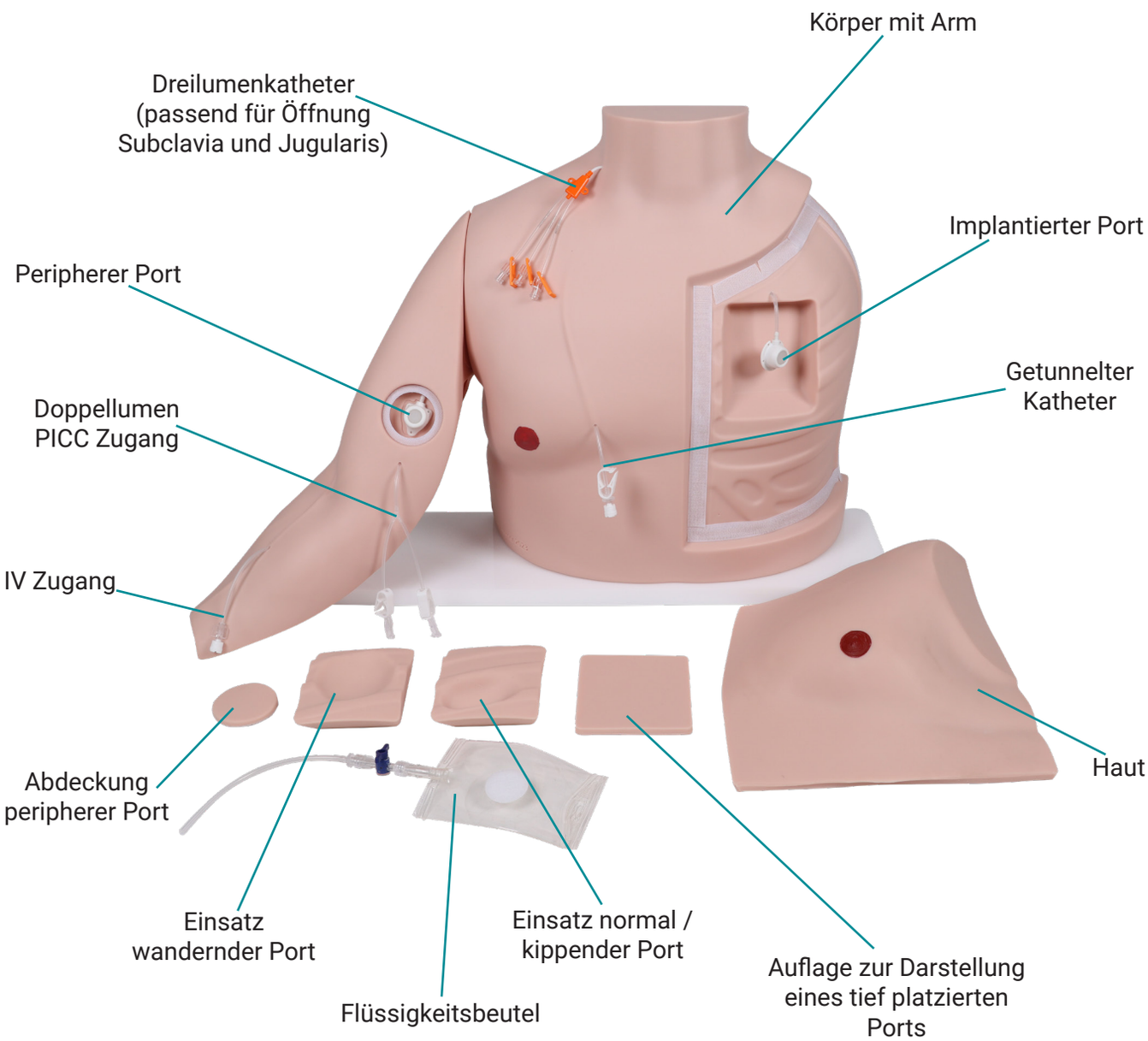


2. Befüllen und Entlüften der Leitungen

Im Körper und im Arm befindet sich jeweils ein Blutbeutel, welcher mit Klettband befestigt und mit einem Luer – Anschluss mit den Kathetern/Ports verbunden ist. Diesen Beutel kann man herausnehmen und mit einer Spritze befüllen.

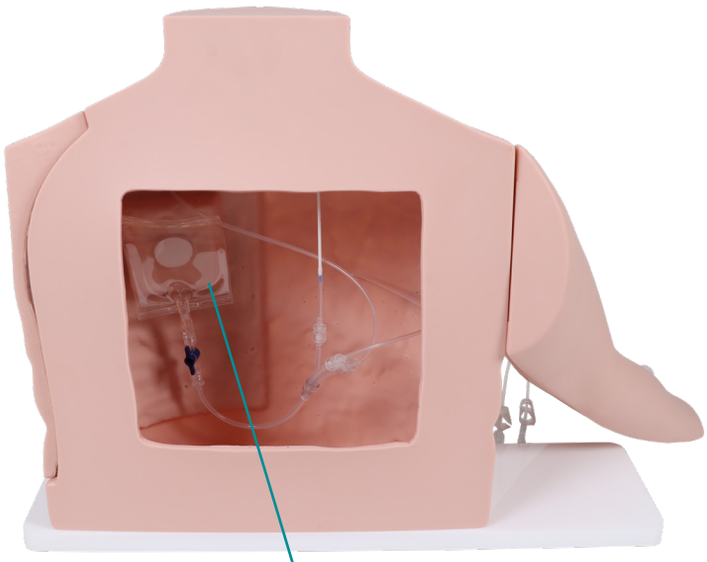

Beutel im Körper

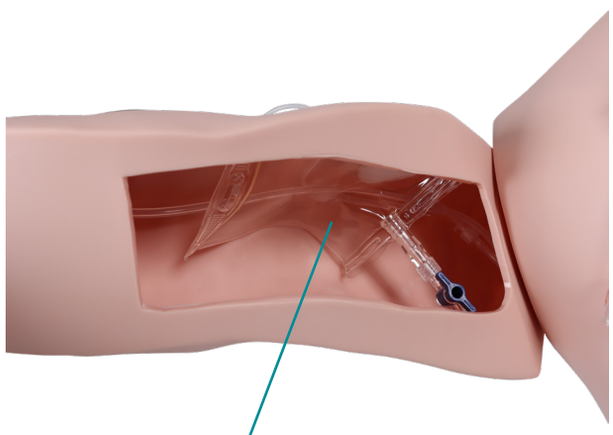


Beutel im Arm

Nachdem die Beutel befüllt sind, müssen die Zuleitungen entlüftet werden. Schließen Sie dafür eine Spritze an die Katheter an und ziehen Sie die Luft aus der Leitung, bis Flüssigkeit in die Spritze läuft. Zum entlüften der Ports verwenden Sie bitte eine Huber-Nadel und ziehen Sie über diese die Luft heraus.


Für das Entleeren gehen Sie einfach in umgekehrter Reihenfolge vor.

3. Umbau des Dreilumen – Katheters von Subclavia auf Jugularis Zugang

Katheter Vorderseite

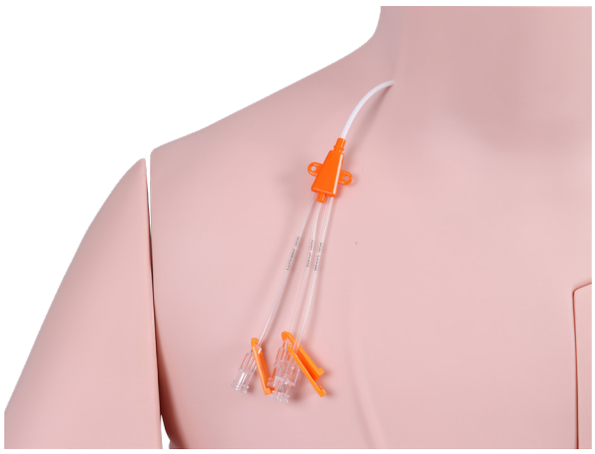

Katheterende im Körper

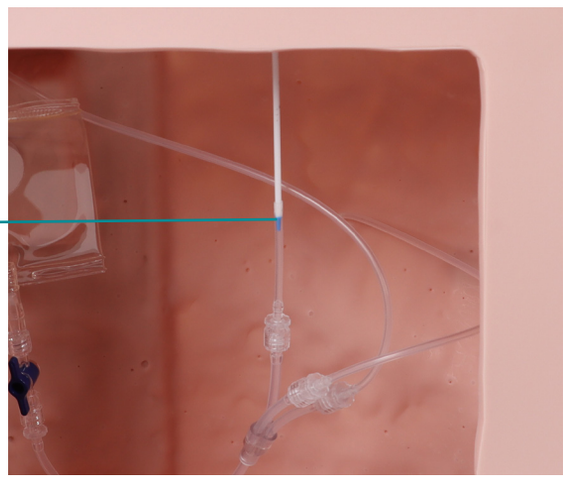

Ziehen Sie das weiße Katheterende mit blauer Spitze aus dem durchsichtigen Silikonschlauch. Der Katheter kann jetzt nach vorne aus der Öffnung gezogen werden und in die andere Öffnung eingeführt werden. Ist der Katheter in der gewünschten Öffnung, das Katheterende (weiß/blau) wieder sorgfältig in den durchsichtigen Schlauch einführen, so dass dieser gut verbunden ist.

4. Einsätze und Ihre Verwendung

Einsatz für normale Port-Platzierung oder kippender Port



Verwenden Sie diesen Einsatz, wenn Sie Den Port normal anbringen möchten oder durch schräges Einsetzen in die Vertiefung einen kippenden Port simulieren möchten.

Einsatz für einen wandernden Port



Verwenden Sie diesen Einsatz, wenn Sie möchten, dass der Port unter der Haut verrutscht. Bringen Sie hierzu etwas Gleitmittel zwischen Einsatz und Port an.

Auflage zur Simulation eines tief platzierten Ports



Legen Sie diese Auflage zwischen Port und Haut des Simulators, um einen tief liegenden Port zu simulieren.

5. Reinigung und Lagerung

Nach der Übung die Leitungen entleeren, mit Wasser spülen und dann komplett entleeren. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in Leitungen oder im Beutel verbleibt, dies kann zu Schimmelbildung führen.

Waschen Sie Verschmutzungen mit lauwarmem Wasser und ggf. einer leichten Seifenlösung ab. Trockenen Sie alle Teile sorgfältig ab.

Lagern Sie das Modell trocken und dunkel. Lassen Sie das Modell nicht im Tageslicht über längere Zeit stehen. Sonneneinstrahlung oder Wärme können zu Verformungen des Modells führen.
Lagern Sie niemals andere Dinge auf dem Modell, dies kann das Modell verformen.
Vermeiden Sie den Kontakt von Drucksachen (Zeitung, bedrucktes Papier usw.) mit dem Modell. Die Druckfarbe kann sich lösen und unauslöschbar in den Kunststoff eindringen. Vermeiden Sie ebenfalls den Kontakt mit gefärbten Textilien (z.B. manche Jeans), auch diese Farbe kann in den Kunststoff eindringen.

Experts in medical education since 1950

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG
Hauptstraße 27
D-77886 Lauf
Tel.: +49 (0)7841 / 6003-0
Fax: +49 (0)7841 / 6003-20
E-Mail: info@erler-zimmer.de

Available 24/7:
www.erler-zimmer.de

Follow us!

ERLER ZIMMER